


VIVEZEN

FR



CEINTURE CHAUFFANTE

Lombaires

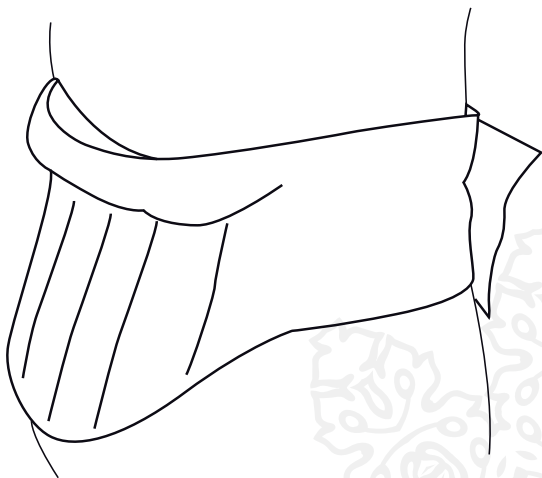

Dessin non contractuel

MANUEL D'UTILISATION

**Nous vous remercions d'avoir choisi la ceinture chauffante
Vivezen. Pour votre sécurité, veuillez lire attentivement
la notice. La ceinture chauffante est conforme
aux exigences de sécurité.**

**IMPORTANT - À CONSERVER
POUR CONSULTATION
ULTÉRIEURE - À LIRE
SOIGNEUSEMENT**

AVERTISSEMENTS	P5
CONSEILS D'UTILISATION	P6
CONSEILS D'ENTRETIEN	P7

NE PAS UTILISER SUR LES MUQUEUSES NI SUR LES PLAIES.

EN CAS DE PROBLÈMES CIRCULATOIRES OU CARDIAQUES, DEMANDER CONSEIL À SON MÉDECIN.

NE PAS UTILISER LA CEINTURE CHAUFFANTE SUR LES BÉBÉS ET JEUNES ENFANTS.

LA CEINTURE CHAUFFANTE EST À UTILISER AVEC PRÉCAUTION CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES.

NE PLUS UTILISER LA CEINTURE SI LA HOUSSE EST ABÎMÉE OU DÉCHIRÉE.

NE PLUS UTILISER LA CEINTURE SI UNE ODEUR DE BRÛLÉ S'EN DÉGAGE QUAND ELLE A ÉTÉ CHAUFFÉE.

NE PAS AVALER LES GRAINS QUI SE TROUVENT À L'INTÉRIEUR DE LA CEINTURE.

AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉTOUFFEMENT, NE PAS LAISSER LES PROTECTIONS PLASTIQUES À LA PORTÉE DES BÉBÉS ET DES ENFANTS.

La ceinture chauffante Vivezen permet de soulager les muscles endoloris, les douleurs du bas du dos et des lombaires, ainsi que les maux de ventre ou les douleurs menstruelles.

Instructions d'utilisation :

Placer la ceinture sur un plat allant au micro-ondes.

Respecter les temps de chauffe selon la puissance du micro-ondes :

- 700 W – max. 2 min. et 30 sec.
- 800 W – max. 2 min
- 900 W – max. 1 minute et 30 sec.
- 1000 W –max. 1 min.

Il est important de ne pas dépasser les temps de chauffe indiqués.

Retourner la ceinture et mélanger les grains à la moitié du temps de chauffe.

Une fois la ceinture chaude, la malaxer puis la déposer sur la zone à traiter (bas du dos ou ventre) et l'attacher à l'aide des bandes auto agrippantes.

La ceinture diffuse sa chaleur pendant plusieurs dizaines de minutes.

Précautions d'emploi :

S'assurer que le micro-ondes est propre avant d'y placer la ceinture.

S'assurer que la ceinture est posée à plat dans le micro-ondes et ne gêne pas le fonctionnement de celui-ci, notamment au niveau de la rotation du plateau tournant.

Ne pas chauffer la ceinture dans un four traditionnel, utiliser uniquement le micro-ondes.

Ne pas surchauffer la ceinture. Tester la température de la ceinture, sur l'avant-bras par exemple, avant usage.

Ne pas chauffer à nouveau la ceinture avant qu'elle soit revenue à température ambiante.

Ne pas ranger la ceinture tant qu'elle n'est pas totalement refroidie. La laisser refroidir sur une surface ininflammable.

Ne pas laver la ceinture chauffante à la machine à laver.

Nettoyer la housse de la ceinture chauffante avec un chiffon humide.



Ce produit vous a été apporté par :



Distribution

EGK Distribution
231 avenue de la Voquette
84300 Cavaillon
Tel. 04 90 04 95 27